

SERENE[®]
innovations
Making Life Easier



Vibrating Alarm Clock Operating Guide

Model
VA-3

Thank you for selecting the Serene VA-3, vibrating alarm clock. The VA-3's powerful sound and vibration is designed to wake-up even the heaviest sleeper.


BATTERY SAFETY AND DISPOSAL:

Model VA-3 is supplied with three AA batteries. Please do not dispose of used batteries in the household trash. Please take the batteries to a retail or community collection point for recycling. For customers living in the European Union, please take the batteries to a recycle center, or return to factory for proper disposal.

PACKAGE CONTENT CHECK:




VA-3 Vibrating alarm clock

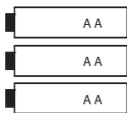

Three AA Batteries




Pillow clip

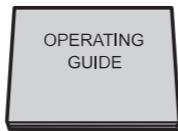

Operating guide

FEATURE IDENTIFICATIONS:

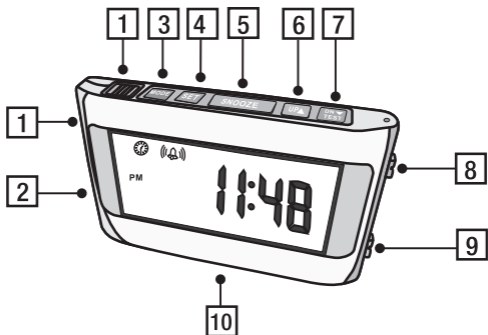

1. Built-in flashlight
2. Alarm mode switch (All, shaker, audio, off)
3. MODE (alarm, timer, temperature)
4. SET to select setting choice
5. SNOOZE
6. UP
7. DN/TEST (down or test)
8. Audio alarm tone control (Hi-Med-Lo)
9. Audio alarm volume control (Hi-Med-Lo)
10. Battery compartment (rear)

FEATURE IDENTIFICATIONS (cont.):

Install three AA alkaline batteries (included). Please observe battery polarity while installing. A set of brand new alkaline batteries will last about six to eight months of normal useage.

Please replace batteries if you notice the shaker is weak or if the back-light is dim.

OPERATION:

1. To set time

1. Press and hold SET for 3 seconds.
2. Press UP to display 12 or 24 hour clock. Press SET to select.
3. Press UP or DN to set the hour and to select AM or PM. Press SET to select. Repeat these steps to set Minute.

2. To set alarm time and snooze

1. Set Alarm Mode switch (on the left side) to "ALL" position.
2. Press MODE button to go to Alarm mode. Press and hold SET button for 3 seconds to select.

OPERATION (cont.):

3. Press UP or DN button to set the alarm hour. Press SET to save. Repeat these steps to set Minute.
4. While SNOZ (SNOOZE) is flashing, press UP button to turn SNOZ OFF or ON and then press SET button to save. Press SET button or wait 15 seconds to exit.
5. SNOOZE function (SNOZ is on)---when the alarm sounds off, the alarm will continue for 40 seconds and then stop. If any buttons on the top of the clock are pushed at any time while the alarm is sounding off, the alarm will stop immediately, but will sound off again in eight minutes. You can repeat this cycle for up to seven times. To stop the alarm and snooze completely, press and hold the SNOOZE button for 3 seconds. Your alarm and SNOOZE will reset and your alarm will ring at the same time

OPERATION (cont.):

the next day.

6. If SNOZ (SNOOZE) is set to off, press the SNOOZE button while the alarm sounding off stops the alarm completely.

3. To set alarm on/off & alarm mode

1. Slide the switch to OFF to disable the alarm or to stop the ongoing alarm action.
2. Slide the switch to AUDIO, SHAKER or ALL (audio + shaker) to select your alarm mode and to set the Alarm ON.

4. To test your alarm setting

(alarm setting must be on)

1. Press and hold TEST for 3 seconds. The alarm is triggered for a period of 10 seconds and then returns to the clock mode.

5. To use clock as a Timer

1. Press MODE to go to the Timer mode. Press and hold SET for 3 seconds to select.

OPERATION (cont.):

2. Press UP or DN to set the desired hour setting. Press SET to select. Repeat these steps to set the desired minute setting.
3. Press DN to start/stop the timer countdown (If DN is not pressed within fifteen seconds, clock will return to the regular timekeeping mode).
4. When the set time expires, the alarm will sound off (same alarm mode as the alarm clock setting) for 30 seconds (unless stopped by pressing any of the top keys).

6. To show the room temperature

1. Press MODE to go to the Thermometer mode. The room temperature appears.
2. If needed, press UP to set reading in C or F.
3. Press MODE to return to the clock mode.

SPECIFICATIONS:

- Functions: clock, alarm clock, timer, thermometer and flashlight
- Clock modes: 12 or 24 hours
- Alarm modes: audio, vibration, audio & vibration
- Thermometer modes: C or F
- Size: 118 x 71 x 27 mm; 4.6 x 2.8 x 1.1 inches
- Weight: (without batteries) 140gm; 5 oz.
- Power supply: 3 AA alkaline batteries (provided)
- Battery life: 8-10 months of normal use
- Vibration: 8200+- RPM at .21A
- Flasher brightness: 2000 mcd

WARRANTY SERVICE INFORMATION:

Your **VA-3** comes with one-year limited warranty. We warrant during this warranty period – from the date of purchase to the original consumer – the **VA-3** is free from defects in materials and workmanship under intended home use. In the event that **VA-3** fails to function properly within one year of the original purchase, due to defects in materials or workmanship,

WARRANTY (cont.):

return the unit (freight prepaid) with proof of purchase (sales receipt or packing slip, no exceptions) to Serene Innovations. Serene Innovations will either repair or replace the unit (with a refurbished unit or a unit of equal condition) and return it to you (using UPS/USPS ground shipping) at no cost to you, if the unit is returned within 30 days of purchase. If the unit is returned after 30 days of purchase, but within the warranty period, there will be a warranty handling charge of US \$9.95 for each return. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other legal rights that vary from state to state.



Serene Group, Inc.

14731 Carmenita Road, Norwalk, CA 90650

Toll Free: 866.376.9271 Local: 562.407.5400 www.sereneinnovations.com

SERENE[®]
innovations
Making Life Easier



Réveil de voyage vibrant Guide de l'utilisateur

Model
VA-3

Merci d'avoir acheté le réveil de voyage VA-3 de Serene, avec son vibreur puissant combiné à l'alarme audio, il peut vous réveiller d'un sommeil des plus profonds.

SÉCURITÉ ET RECYCLAGE DES PILES:

Le réveil VA-3 est livré avec 3 piles AA. Ne jetez pas vos piles usagées aux ordures. Apportez plutôt les piles usagées dans un commerce offrant le service ou au centre de recyclage de votre localité. Si vous habitez dans une région de la Communauté Européenne, apportez également vos piles au centre de recyclage le plus près de chez vous ou chez le fabricant pour qu'il en dispose adéquatement.

CONTENU DE L'EMBALLAGE:




Réveil vibrant modèle VA-3



Trois piles AA




Pince d'oreiller

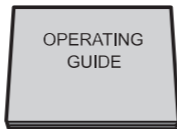

Manuel d'utilisation

CARRACTÉRISTIQUES:

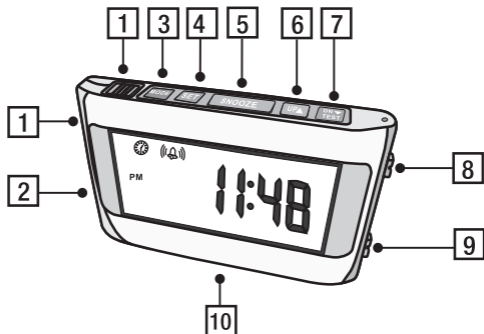

1. Lampe de poche intégrée
2. Sélecteur du mode d'alarme (tous, shaker, audio, arrêt)
3. MODE (alarm, timer, temperature)
4. SET pour confirmer vos choix de réglages
5. SNOOZE
6. UP
7. DN/TEST (bas ou test)
8. Contrôle de tonalité d'alarme audio (Hi-Med-Low)
9. Contrôle du volume de l'alarme audio (Hi-Med-Lo)
10. Compartiment des piles (arrière)

CARRACTÉRISTIQUES (suite):

Installez les trois (3) piles AA alcalines (incluses). Veuillez porter attention à la polarité des piles lors de l'installation. Un ensemble de piles alcalines neuves procurent une durée d'utilisation d'environ six à huit mois à usage normal.

S'il vous plaît remplacer les piles si vous remarquez l'vibreur est faible ou si le rétro-éclairage est faible.

FONCTIONNEMENT :

1. Pour régler l'heure

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton SET (RÉGLER) pendant 3 secondes.
2. Appuyez sur UP (HAUT) pour choisir entre un affichage au format 12 ou 24 heures. Appuyez sur SET (RÉGLER) pour confirmer votre sélection.
3. Appuyez sur UP (HAUT) ou DN (BAS) pour régler l'heure et pour sélectionner AM (matin) ou PM (après-midi). Appuyez

FONCTIONNEMENT (suite):

sur SET (RÉGLER) pour confirmer votre sélection. Répétez ces étapes pour régler les minutes.

2. Pour régler l'heure de l'alarme et la durée du rappel

1. Réglez l'interrupteur du mode d'alarme (à gauche) sur la position « ALL » (TOUS).
2. Appuyez sur le bouton MODE pour passer au mode d'alarme. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton SET (RÉGLER) pendant 3 secondes pour effectuer votre sélection.
3. Appuyez sur le bouton UP (HAUT) ou DN (BAS) pour régler l'heure d'alarme. Appuyez sur SET (RÉGLER) pour sauvegarder. Répétez ces étapes pour régler les minutes.
4. Alors que SNOZ (RAPPEL) clignote, appuyez sur le bouton UP (HAUT) pour activer ou désactiver SNOZ (RAPPEL),

FONCTIONNEMENT (suite):

puis appuyez sur le bouton SET (RÉGLER) pour sauvegarder. Appuyez sur le bouton SET (RÉGLER) ou attendez 15 secondes pour quitter.

5. Fonction de rappel (SNOZ est activé)
--- lorsque l'alarme se déclenche, elle continuera d'émettre un signal sonore durant 40 secondes puis s'arrêtera. Si l'un des boutons situés sur le haut du réveil est appuyé alors que l'alarme retentit, celle-ci s'interrompra immédiatement, mais retentira de nouveau après huit minutes. Vous pouvez répéter ce cycle jusqu'à sept fois. Pour arrêter complètement l'alarme et la fonction de rappel, appuyez et maintenez enfoncé le bouton SNOOZE (RAPPEL) pendant 3 secondes. Votre alarme et SNOOZE (RAPPEL) seront réinitialisés et votre alarme retentira à la même heure le jour suivant.

FONCTIONNEMENT (suite):

6. Si le bouton SNOZ (RAPPEL) est désactivé, appuyez sur le bouton SNOOZE (RAPPEL) alors que l'alarme retentit pour interrompre totalement l'alarme.

3. Pour régler l'alarme sur on/off (activation/désactivation) ainsi que le mode d'alarme

1. Faites glisser l'interrupteur sur OFF (ARRÊT) pour désactiver l'alarme ou pour interrompre l'alarme alors qu'elle retentit.

2. Faites glisser l'interrupteur sur AUDIO, SHAKER (VIBREUR) ou TOUS (audio + vibreur) pour sélectionner votre mode d'alarme et activer l'alarme.

4. Pour tester votre réglage de l'alarme (le réglage de l'alarme doit être activé)

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton TEST pendant 3 secondes. L'alarme est déclenchée pour une

FONCTIONNEMENT (suite):

période de 10 secondes, puis revient au mode horloge.

5. Pour utiliser l'horloge comme un minuteur

1. Appuyez sur le bouton MODE pour passer au mode Timer (Minuteur). Appuyez et maintenez enfoncé le bouton SET (RÉGLER) pendant 3 secondes pour effectuer votre sélection.
2. Appuyez sur le bouton UP (HAUT) ou DN (BAS) pour régler l'heure de votre choix. Appuyez sur SET (RÉGLER) pour confirmer votre sélection. Répétez ces étapes pour régler les minutes selon votre choix.
3. Appuyez sur DN (BAS) pour démarrer/arrêter le compte à rebours du minuteur (si DN n'est pas appuyé dans les quinze secondes, l'horloge reviendra au mode de chronométrage habituel).
4. Lorsque le délai fixé expire, l'alarme

FONCTIONNEMENT (suite):

retentira (il s'agit du même mode d'alarme que pour le réglage du réveil) pendant 30 secondes (sauf en cas d'arrêt en appuyant sur l'une des touches du haut).

6. Pour afficher la température ambiante

1. Appuyez sur le bouton MODE pour passer au mode Thermometer (Thermomètre). La température ambiante s'affiche.
2. Si nécessaire, appuyez sur UP (HAUT) pour obtenir une mesure en degrés Celsius ou Fahrenheit.
3. Appuyez sur le bouton MODE pour revenir au mode horloge.

SPÉCIFICATIONS:

- Fonctions: horloge, réveil matin, chronomètre, thermomètre et lampe de poche
- Horloge: 12 ou 24 heures
- Modes d'alarmes: audio, vibration, audio et vibration
- Thermomètre: C ou F
- Dimensions: 118 x 71 x 27 mm; 4.6 x 2.8 x 1.1 pouces
- Poids: (sans les piles) 140gm; 5 oz.
- Courrant: 3 piles alcalines AA (fournies)
- Durée des piles: 8-10 mois d'usage normal
- Vibration: 8200+- RPM at .21A
- Luminosité du clignotant: 2000 mcd

GARANTIE:

Le VA-3 comprend un garantie d'un an. Pendant la période couverte par la garantie, à partir de la date d'achat, nous garantissons que le VA-3 sera except de défauts matériaux ou de fabrication dans des conditions d'utilisation domestique. Advenant le cas où VA-3 cesserait de fonctionner correctement moins d'un an après la date d'achat, à cause de défauts matériels ou de fabrication, renvoyez l'appareil (fret prépayé) avec la preuve d'achat (reçu de vente ou bordereau d'expédition, sans excpetion) à Serene Innovations. Serene Innovations s'occupera de remplacer ou de réparer l'appareil (par un appareil réusiné ou dans la même condition), puis vous le renverront sans frais (service d'expédition terrestre UPS/USPS), si vous retournez l'appareil trente jours ou moins après la date d'achat. Si l'appareil est retourné plus de trente jours après la date achat, mais à l'intérieur de la période de garantie, vous devrez payer des frais de manutention de 9,95\$ par renvoi.

GARANTIE (suite):

Cette garantie a cours légal et peut varier selon l'endroit où vous vivez, les lois locales peuvent s'appliquer.



Serene Group, Inc.

14731 Carmenita Road, Norwalk, CA 90650

Toll Free: 866.376.9271 Local: 562.407.5400 www.sereneinnovations.com

Copyright © 2018 Serene Innovations, Inc. All rights reserved.

Rev 5-18