



USER'S MANUAL Emergency Help Button



English

Model CA-SOS is an optional accessory for the **CentralAlert™** Visual Alert System. It is a wireless personal pager designed for paging HELP.

When activated, a wireless signal is sent to a **CentralAlert™** Master-Unit. This activates all alerting outputs while "SOS" is shown on its display.

Model CA-SOS is a water-resistant design and is supplied with a lanyard. The unit can be mounted inside a shower stall or near a bathtub.

Operating Guide

Model
CA-SOS

Thank you for purchasing this product, please read before use
(Keep this manual for future reference)

2

English

2. This indicates the unit is working normally.

Registering Model SOS:

Model CA-SOS must be learned by a Master-Unit in order to work with the system.

1. Press and hold the "SOS/Test" button on the **CentralAlert™** Master-Unit for about 5 seconds (in **RUN** mode) to set it to a Learn mode. Digital display shows "LEAr."
2. Press and hold the "SOS/Test" button on Model CA-SOS for about 5 seconds until the Master-Unit responds.
3. Registration is now completed. Press the "SNOOZE/RESET" button on the Master-Unit to end the Learn mode.

4

English


Testing:

1. Press the "SOS/Test" button to test.
2. Confirm that the Master-Unit activates all alerting outputs in response.

Installation:

1. Model CA-SOS comes with a lanyard and may be worn as a personal pager. It can also be mounted near any convenient place such as bathroom or kitchen (use a piece of 1" x 1" double sided sponge tape).

English

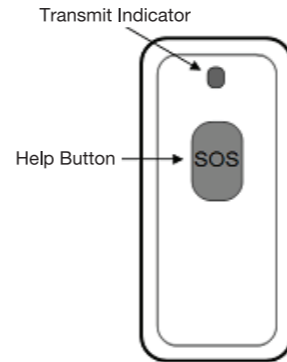


Replace Battery:

1. Press on latch to separate SOS button from back plate.
2. Unscrew screws from corners, separate center section from unit.

6

English

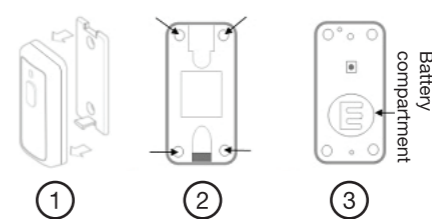

3. Change battery - remove the old battery first. Pay attention to the battery orientation - the coin battery is in correct position when the writing on it is face up (towards you, as you look at it).
4. Slide new coin battery all the way into battery compartment; reassemble unit.

Specifications:

1. Advanced Technology: 2.4 Ghz Smart-Code
2. Operating range: Up to 200 ft, open space (outdoors) - actual distance varies according to house construction.
3. Up to four Model CA-SOS' are supported
4. Battery type: size 2032 coin battery
5. Battery life: up to 24 months
6. Operating temperature: +10 to +40°C
7. Size: 2.5" x 3.8" x 1" Wt: 4 Oz
8. Spec is subject to change

English



Manuel d'utilisation

Bouton d'Appel à l'Aide



Modèle
CA-SOS

Guide d'exploitation

Merci d'avoir acheté ce produit,
S'il vous plaît lire avant d'utiliser
(Gardez ce manuel pour référence future)

Français

Le modèle CA-SOS est un accessoire optionnel pour le Système Visuel d'Alerte **CentralAlert™**. Il s'agit d'un téléavertisseur sans fil personnel conçu pour envoyer le message HELP. Lorsqu'activé, un signal sans fil est envoyé à l'Unité-Maîtresse d'un **CentralAlert™**. Cela active toutes les sorties d'alerte tandis que **"SOS"** s'affiche sur son écran. Le modèle CA-SOS est résistant à l'eau et vient avec un cordon. L'unité peut être installée dans une douche ou près d'un bain.

Installation des piles:

1. Vérifier que l'indicateur de transmission (**TRANSMIT** – verte) clignote lorsque le bouton **"SOS/Test"** est pressé.
2. Cela indique que l'unité fonctionne normalement.

8

Enregistrement du modèle CA-SOS:

Cet accessoire optionnel doit être enregistré par une Unité-maîtresse afin de fonctionner avec le système.

1. Presser et maintenir enfoncée la touche **"SOS/Test"** de l'Unité-Maîtresse pendant environ 5 secondes afin de placer cette dernière en mode d'enregistrement. L'écran numérique affichera **"LEAr."** (Le bouton Time **SET** doit être à la position **RUN**)
2. Presser et maintenir enfoncé le bouton **"SOS/Test"** du CA-SOS pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que l'Unité-Maîtresse réponde.
3. L'enregistrement est maintenant terminé. Presser la touche **"SNOOZE / RESET"** sur l'Unité-Maîtresse afin de quitter le mode d'enregistrement.

Français


Mise à l'essai:

1. Presser le bouton **"SOS/Test"** pour mettre à l'essai.
2. Assurez-vous que **CentralAlert™** active toutes les sorties d'alerte en mode réponse.

Installation:

1. Le modèle CA-SOS vient avec un cordon et peut être porté comme un téléavertisseur personnel. Il peut également être installé près de tout endroit propice, comme la salle de bain ou la cuisine (utiliser un morceau de collant double face de 1" x 1")


Français

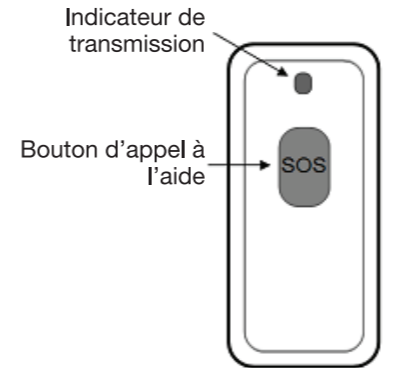

Remplacement de la pile

1. Appuyer sur le taquet pour séparer la sonnette de la plaque de montage
2. Retirer les vis des 4 coins puis séparer la section du centre de l'unité

Français

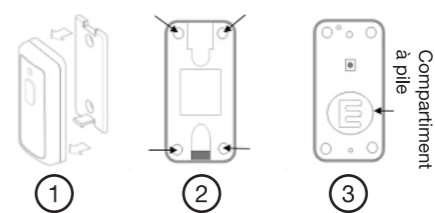

3. *Remplacement de la pile – retirer tout d'abord l'ancienne pile. Soyez attentif à l'orientation de la pile – la pile est bien positionnée lorsque l'écriture sur sa surface se trouve face vers le haut (vers vous lorsque vous la regardez).*
4. Faire glisser la pile jusqu'à l'intérieur du compartiment à pile; réassembler l'unité

Spécifications:

1. Technologie avancée: 2.4 Ghz Smart-Code

12

Français

2. Portée de transmission: Jusqu'à 200 pieds, espace ouvert – la distance peut varier selon le type de construction de la maison.
3. Jusqu'à 4 modèles CA-SOS sont supportés par un système.
4. Type de pile: Une pile au lithium de grosseur 2032
5. Durée des piles: jusqu'à 24 mois
6. Température d'utilisation: de +10 à +40°C
7. Dimensions: 2.5" x 3.8" x 1" Poids: 4 Oz
8. Spécifications sujettes à changement



Serene Innovations, Inc.

14731 Carmenita Road, Norwalk, CA. 90650
Toll Free: 866-376 9271, Fax: 560-483-2087
Website: www.sereneinnovations.com
Email: Customercare@Sereneinnovations.com

Français